

PIP Test Tubes

لوله‌های پل ایده آل پارس




لوله آزمایش CBC

نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی با تشخیص حجم نمونه

لوله‌های CBC تولید شده توسط P.I.P، یکبار مصرف و فاقد هرگونه ماده ضد انعقاد می‌باشد که در دو جنس پلی‌استایرن و پلی‌پروپیلن قابل ارائه است. درب این لوله از دو نوع کپ (پلی‌اتیلن) و فشاری (پلی‌پروپیلن) است. از لحاظ ساختاری کف مسطح این لوله امکان ایستایی را برای آن فراهم آورده است. از مزیت‌های اصلی این لوله‌ها مدرج بودن آن می‌باشد و این درجه‌بندی به صورت شماتیک در پایین تصویر نشان داده شده است.

ایران کد	مدل درب	ظرفیت	جنس	ابعاد	تعداد در بسته
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳	فشاری	۵ ml	پلی‌پروپیلن	قطر خارجی دهانه: $\phi 16/2$ mm ارتفاع: ۵۴ mm	۴۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱	کپ	۵ ml	پلی‌استایرن	قطر خارجی دهانه: $\phi 16/2$ mm ارتفاع: ۵۴ mm	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	فشاری	۵ ml	پلی‌پروپیلن	قطر خارجی دهانه: $\phi 16/2$ mm ارتفاع: ۵۴ mm	۲۰۰

* برای اطلاعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی‌استایرن (PS) به بخش اطلاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

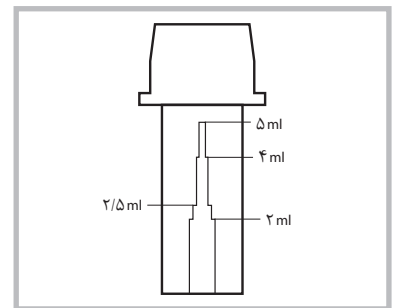

لوله آزمایش ساده

نگهداری و انتقال نمونه آزمایشگاهی

این لوله‌ها از پلی‌پروپیلن شفاف ساخته شده‌اند، یکبار مصرف می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت نگهداری و انتقال انواع نمونه‌ها استفاده نمود. این لوله‌های آزمایش در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه مقاوم هستند. لوله‌های آزمایش ساده در دو سایز متفاوت و به صورت با درب (فشاری PP و کپ PE) و بدون درب ارائه می‌شوند.

ایران کد	ظرفیت	ابعاد (ارتفاع/قطر)	جنس - نوع درب	تعداد در بسته
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۷ ml	$\phi 12$ mm $\times$ ۱۰۰ mm	-	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۹ ml	$\phi 16$ mm $\times$ ۱۰۰ mm	-	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳	۷ ml	$\phi 12$ mm $\times$ ۱۰۰ mm	PP - فشاری	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۹ ml	$\phi 16$ mm $\times$ ۱۰۰ mm	PP - فشاری	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۴	۹ ml	$\phi 16$ mm $\times$ ۱۰۰ mm	PE - کپ	۲۰۰



درب فشاری در کپ




درب لوله لبه‌دار (قارچی)

جلوگیری از نشت و تبخیر محتوای لوله آزمایش

درب لوله‌های لبه‌دار از جنس پلی‌اتیلن (EP) و در سه مدل جهت استفاده با لوله‌های به قطر ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ میلی‌متر موجود هستند. دو لبه‌ی منعطف تعبیه شده در این درب‌ها، ضد نشت بودن آن‌ها را تضمین کرده و فاصله‌ی مناسب این لبه‌ها از یکدیگر نسبت به نمونه‌های مشابه، ضریب اطمینان از عدم نشت و تبخیر نمونه را بالا می‌برد. طراحی هلالی شکل انتهای این درب‌ها از چسبیدن نمونه به آن‌ها جلوگیری می‌کند. این درب‌ها در رنگ‌های متنوع موجود هستند که امکان دسته‌بندی راحت نمونه‌ها و استفاده از سیستم کدگذاری رنگی را فراهم می‌سازد.

ایران کد	تعداد در بسته	لوله‌های مناسب	نوع درب	مدل
۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳	۲۰۰	لوله‌های آزمایش، سانتریفوژ و کووت‌های مدور با قطر ۱۲ میلی‌متر (۱۲۰۰×۱۲ و ۷۵۰×۱۲۰۰)	فشاری	کوچک
۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۲۰۰	لوله‌های آزمایش، سانتریفوژ و کووت‌های مدور با قطر ۱۳ میلی‌متر (۱۳۰۰×۱۳ و ۱۰۰۰×۱۳)	فشاری	متوسط
۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵	۲۰۰	لوله‌های آزمایش، سانتریفوژ و کووت‌های مدور با قطر ۱۶ میلی‌متر (۱۶۰۰×۱۶ و ۱۰۰۰×۱۶)	فشاری	بزرگ

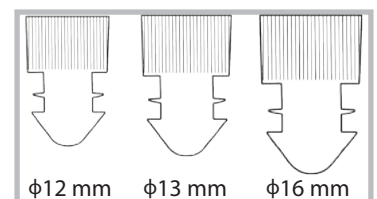

لوله مخروطی

نگهداری نمونه آزمایشگاهی و استفاده در دستگاه سانتریفوژ

این لوله‌های یکبارمصرف از پلی پروپیلن شفاف ساخته شده‌اند و انتهای آن‌ها مخروطی شکل است. لوله‌های مدرج مخروطی شکل در دو سایز با ظرفیت‌های ۱۵ میلی لیتر (دارای درجه‌بندی تا ۱۲ ml) و ۵۰ میلی لیتر جهت نگهداری نمونه و نیز استفاده در دستگاه سانتریفوژ

تا نیروی (RCF) ۶۵۰۰g طراحی شده‌اند و قابل اتوکلاو و فریز کردن می‌باشند. درب این لوله‌ها از نوع پیچی است. لوله‌های مخروطی شکل در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم هستند و با درب‌هایی در رنگ‌های متنوع قابل ارائه می‌باشند.



ایران کد	ظرفیت	درجه‌بندی	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	تعداد در بسته
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۱۵ ml	۰/۵ ml	۱۲۰ mm	۱۷ mm ϕ	۱۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	۵۰ ml	۲/۵ ml	۱۱۷ mm	۲۹ mm ϕ	۵۰


* این لوله‌ها قابل ارائه در بسته‌های ۲۵ عددی به همراه رک نگهدارنده لوله مخروطی نیز می‌باشند.

لوله گاما کانتر

نگهداری نمونه آزمایشگاهی

دارند و می‌توان از آن‌ها در زمینه‌های گوناگون از قبیل نگهداری نمونه و رقیق‌سازی استفاده نمود. ابعاد این لوله‌ها به گونه‌ای انتخاب و طراحی شده است که بتوان آنها را مستقیماً درون بسیاری از دستگاه‌ها قرار داد و دیگر نیازی به تعویض لوله نباشد و از ریختن و هدر رفتن نمونه در هنگام انتقال جلوگیری شود.

لوله گاما کانتر P.I.P. یکبار مصرف بوده و در دو مدل شفاف از جنس پلی استایرن و مات از جنس پلی پروپیلن ساخته شده که مدل شفاف قابلیت استریل شدن با پرتوی گاما را دارد و مدل مات قابل اتوکلاو می‌باشد و هر دو مدل قابل استریل شدن با گاز اتیلن اکساید هستند. این لوله‌ها کاربرد فراوانی در انجام تست‌های ایمنواسی (RIA, EIA, ...)

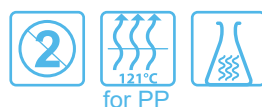

for PP

ایران کد	مدل	جنس	ظرفیت	ابعاد (ارتفاع × قطر)	تعداد در بسته
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	شفاف	PS	۵ ml	۱۲mm ϕ × ۷۵mm	۵۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹	مات	PP	۵ ml	۱۲mm ϕ × ۷۵mm	۵۰۰

* برای اطلاعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن (PS) به بخش اطلاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

لوله نمونه‌برداری قاشق‌دار

نمونه‌برداری و نگهداری انواع نمونه‌ها

رنگ‌های مختلف عرضه می‌شود و پرسنل آزمایشگاهی می‌توانند به هر نوع نمونه یک رنگ را اختصاص دهند. درب این لوله، پیچی، ضدنشست و قاشق آن متصل به درب است. این لوله قابل اتوکلاو بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه مقاوم است.

لوله نمونه‌برداری قاشق‌دار یکبارمصرف P.I.P. از جنس پلی پروپیلن با گنجایش ۱۵ میلی لیتر و عمق ۵۱ میلی متر وسیله‌ای مناسب برای نگهداری و حمل انواع نمونه مانند: انواع بافت، ترشحات مخاطی، اسپرم و... می‌باشد که جهت تسهیل دسته‌بندی نمونه‌ها، این محصول در



ایران کد	ظرفیت	ارتفاع با درب	ابعاد (قطر دهانه × ارتفاع لوله)	ارتفاع قاشق	تعداد در بسته
۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۱۵ ml	۶۸ ml	۵۱ mm ϕ × ۲۰ mm	۴۵ mm	۱۰۰۰



www.medpip.com

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتاح
خیابان جهاتتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ (۰۲۱)

۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷

فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱)

🌐 www.medpip.com
✉ info@medpip.com

🏢 Pole Ideal Pars Co.
📱 [poleideal](https://www.instagram.com/poleideal)