


شرکت پل ایده آل پارس

جالوله‌ای فالکون



Falcon Tube Racks

www.medpip.com

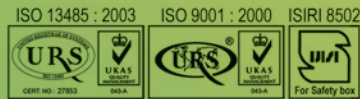

۱ دارای کد بندی ماتریسی رقمی - حروفی ۲ قابلیت حمل آسان ۳ قابل اتوکلاو تا دمای $+121^{\circ}\text{C}$
۴ قابل فریز تا دمای -196°C ۵ سهولت در مونتاژ ۶ امکان جداسازی قطعات جهت نیاز به فضای کمتر
در زمان اتوکلاو نمودن ۷ تنوع در رنگ بندی (زرد و نارنجی)

1 Alphanumerically coded for easy identification 2 Easy handling 3 Autoclavable up to $+121^{\circ}\text{C}$ 4 Freezable down to -196°C 5 Easy assembling and disassembling due to the click-system 6 Distance pieces can be removed from the plates before autoclaving in order to save space. 7 Available in two colors (yellow, orange)

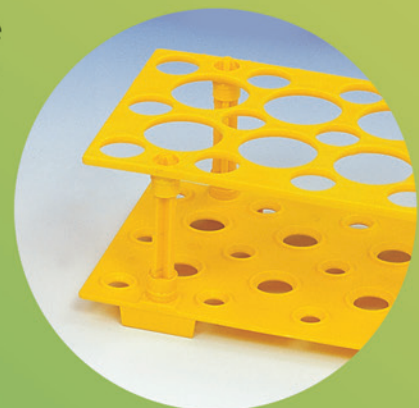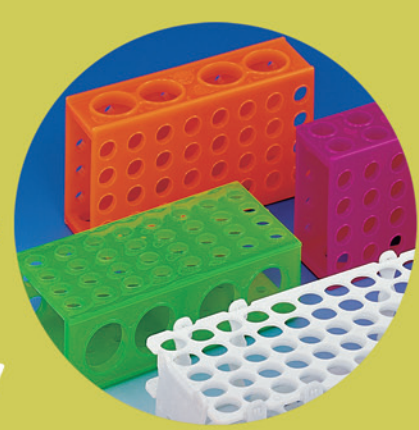




Falcon Tube Racks جالوله‌ای فالکون

نام محصول Product Description	ظرفیت لوله مصرفی Tube Cap. (ml)	تعداد لوله مصرفی Array	ابعاد (mm) ارتفاع×عرض×طول Dimensions (mm) L×W×H	تعداد در بسته بندی Qty. Per Carton
جالوله‌ای فالکون مدل ۲۸ خانه 28-hole falcon tube rack	15	3x6	207x97x60	۲۵ عدد + ۲۵ عدد 25pcs. + 25pcs.
جالوله‌ای فالکون مدل ۵۰ خانه 50-hole falcon tube rack	15	5x6	207x170x60	۲۵ عدد + ۲۵ عدد 25pcs. + 25pcs.

www.medpip.com

نحوه مونتاژ Assembly

۱. صفحه پایینی (دارای پایه) روی میز صاف قرار داده شود.
1. Place the lower plate, which has four legs, on a flat table.

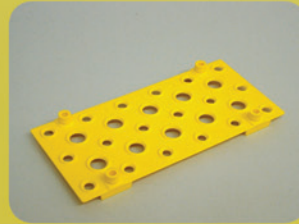




۲. چهار عدد ستون واسطی بین صفحات در محل نصب شود.
2. Snap four distance pieces into place, on the lower plate.



۳. صفحه فوقانی (دارای کد) در محل خود روی ستون‌ها قرار گیرد، به نحوی که سطح دارای نوشته به سمت بالا باشد.
3. Place the upper coded plate on the distance pieces in a way so that the alphanumeric surface faces upwards.



۴. چهار گوشه صفحه فوقانی به صورت ضربدری به صورت ضربه‌ری، تا شنیده شدن صدای کلیک، فشار داده شود.
4. Push down four angles of the upper plate criss-cross until click sounds can be heard.

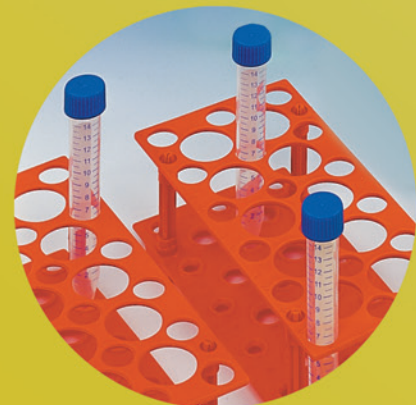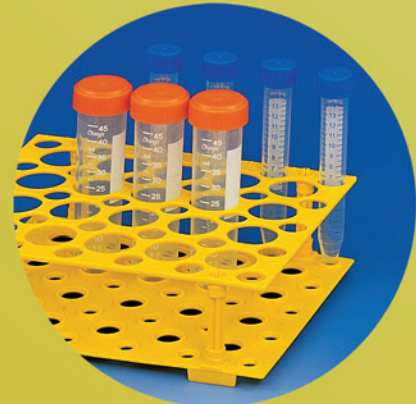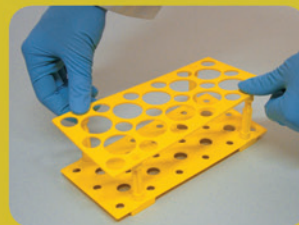

شرکت پل ایده آل پارس تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتاح، خیابان جهانتاب،
خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
info@medpip.com

No. : 87189