



Pole Ideal Tajhiz Co.  
www.medpit.com

# انکوباتورهای

کلاسیک / یخچال دار / شیکردار

**PIT053RS / PIT053R / PIT053**

## P.I.T. Incubators



# انکوباتورهای P.I.T. کلاسیک/یخچال دار/شیکردار

- قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی
- قابلیت رسم نمودار زمان-دما
- دارای درب شیشه ای ثانویه به منظور جلوگیری از تغییر دما یا تسريع بازگشت دما به میزان تعیین شده در هنگام باز و بسته نمودن درب اصلی و مشاهده نمونهها در محفظه آزمایش
- مجهز به کنترل میکروپروسسور به منظور کنترل دقیق دما
- دارای سیستم سیرکولاسیون (الکتروفن) درون دستگاه به منظور همگن نمودن دمای نقاط مختلف محفظه آزمایش با قابلیت تنظیم سرعت
- سیستم ایزو ولاسیون دوجداره به منظور کاهش افت دما و بازدهی بالاتر
- قابلیت اتصال به چاپگر و کامپیوتر (به سفارش مشتری)
- قابلیت تنظیم شب رسیدن به دمای تنظیمی گرمایش و سرمایش (در مدل یخچال دار و شیکردار)
- مجهز به دریچه خروجی قابل تنظیم (صرفاً در مدل کلاسیک)

## عملکرد

- بدنه ای داخلی از جنس استیل ضد زنگ
- دارای دو عدد سینی استیل ضد زنگ با قابلیت تغییر فاصله طبقات
- طراحی زیبا و کاربری آسان (دارای صفحه نمایش LCD بزرگ)

## ایمنی

- مجهز به سیستم ایمنی ثانویه جهت جلوگیری از افزایش یا کاهش بی رویه دما و از بین رفتن نمونهها
- دارای مکانیزم مکانیکی به منظور حفظ تعادل طبقات در زمان بارگذاری نامتقارن
- دارای سوکت برق داخلی (به سفارش مشتری)

## یخچال در مدل های

### یخچال دار و شیکردار (PIT053RS & PIT053R)

- دارای سیستم دورانی بی صدای شیکر
- محافظت از قطعات حساس در برابر ریش احتمالی مایعات مورد آزمایش
- دارای تعادل مناسب در هنگام کار، به دلیل مرکز ثقل پایین دستگاه
- امکان استفاده از ارلن گیر یا صفحه اصطکاکی جهت قرارگیری ظروف
- امکان هم زدن سیالات به روش خطی یا اوربیتالی (به سفارش مشتری)
- امکان استفاده انکوباتور مستقل یا توأم با شیکر

## شیکر

### (PIT053RS مدل شیکردار)

**Quality  
Precision  
Satisfaction**  
[www.medpit.com](http://www.medpit.com)



مدل کلاسیک و مدل یخچال دار



مدل شیکردار

انکوباتور شیکردار	انکوباتور یخچال دار	انکوباتور کلاسیک	نام
PIT053RS	PIT053R	PIT053	مدل
۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۵۱	۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲	۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱	ایران کد
۲۱۰ - ۲۳۰			ولتاژ (V)
۵۰			فرکانس (Hz)
۴۰۰	۶۵۰	۴۵۰	حداکثر توان (W)
(بدون شیکر) از ۵ - ۱۰۰ (با شیکر) از ۴ + ۵۰	از ۵ - ۱۰۰	دماهی محیط - ۱۰۰	دامنه دما (°C)
۵۳		۵۳	حجم (L)
		50 (قابل تنظیم)	دریچه خروجی (mm)
۳۳۰×۴۰۰×۴۰۰			ابعاد داخلی: ارتفاع × عرض × عمق (mm)
۶۴۶×۶۳۵×۸۳۶			ابعاد خارجی: ارتفاع × عرض × عمق (mm)
۷۲	۷۲	۵۲	وزن تقریبی (Kg)
±۰/۱			دقت دمایی (°C)


### مشخصات فنی شیکر

اوربیتالی یا خطی (به سفارش مشتری)	نحوه حرکت
۱۰	کورس حرکتی سینی (mm)
۳	حداکثر ظرفیت بارگذاری (Kg)
۱۰ - ۴۵	توان ورودی - خروجی موتور (W)
۲۰ - ۲۲۰ (+ ۹۹:۵۹ / ∞)	دامنه سرعت (rpm)
دیجیتال	نمایشگر تایمر و سرعت (بر روی پنل انکوباتور)
دائم کار / با محدودیت زمانی	نحوه عملکرد
۳۴۵ × ۳۱۸ × ۱۸۰	ابعاد خارجی با سینی ارتفاع × عرض × عمق (mm)
۸	وزن تقریبی (Kg)

### شیکر




**Shaking  
Incubator**

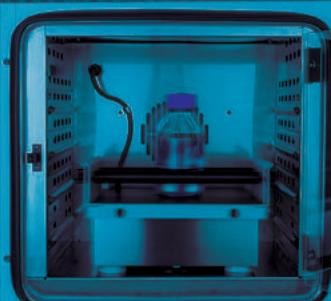



# مشاوره و پشتیبانی فنی ایمنی و عملکرد ایدهآل گارانتی و خدمات پس از فروش کیفیت

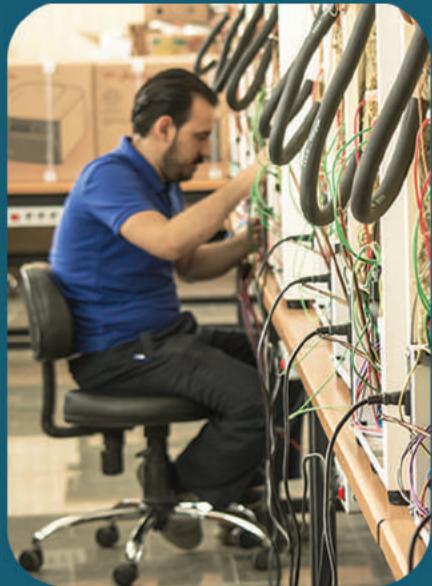

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی  
خیابان حجت دوست - پلاک ۱۳ - واحد ۱۱

تلفن: ۰۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ - دورنگار: ۸۸۹۹۴۴۸۴

تلفن دفتر فروش: ۰۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴

✉ @poleideal ☎ ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷ ➔ @poleideal

Pole Ideal Pars Co.

## دانسته‌بیان



Management  
systems  
Certification Body  
MSCB 105

رایاست کمیسری  
وزارت صحت مدنی و تجارت  
کارگروه شناختی شرکت‌های دانش‌بنیان  
پژوهش‌های پژوهشی و تحقیقاتی